



Instructions for the use of IGS Instant Grip Socks

IGS Instant Grip Socks are easy to use, breathable and flexible. The socks prevent slipping while walking on floors and wet surfaces and ease changing position in bed. The product is made of environmentally friendly material that can be recycled for energy. The Instant Grip Socks create strong friction between the patient's feet and the floor. When dressing the patient, roll the sock up foot-do not pull.

Selection of IGS Instant Grip Sock

Choose the appropriate sock size (S, M, L, XL, XXL) based on the user's shoe size. If there are swelling, sutures or ulcers on the foot, simply go up one size. You can stretch the sock out at points of swelling, sutures or ulcers as required by cutting holes in the mesh structure. The mesh will not come apart beyond the cuts made. Not recommended for patients with foot drop or other neurological issue affecting gait.

Dressing

1. Start by placing the tip of the rolled sock at the toes and continue by unwrapping the sock towards the heel- do not pull.
2. Roll the sock open towards and over the ankle by gently stretching the sock with your thumbs.
3. Level the sock's mesh structure by "rubbing" it on the foot, at the same time checking that the sock is not too tight at the toes.

NB! Avoid straining the mesh structure at the heel and avoid tight layers at the ball of the foot and ankle.

Cutting

4. If the user's feet are swollen or there are ulcers or stitches, the sock can be widened by cutting. Raise the mesh off the skin and cut at the chosen locations.
5. To wash toes in the shower, you can cut approximately 5cm of the sock horizontally at the lower part of the ball of the foot. Flip the tip of the sock under the foot and after washing turn it back into place.

NB! Always leave at least 2cm of intact material at the sock stem in order to keep the sock in place.

Undressing

6. Remove the socks by rolling from the cuff of the sock down towards the tip.

After using the Instant Grip Socks for 24 hours on bare feet the socks need to be rinsed or washed in 40 degrees with mild detergent.

The product is not suitable for outdoor use.

Not recommended for people with strong rubber allergies or on bare ulcerated skin.

Not recommended for people who drag their legs



IGS -Gripsockans Bruksanvisning

Lätt att använda, luftig och flexibel. Användbar inomhus på alla golvytor, också våta utrymmen. Gripsockan gör det lättare att byta position i sängen. Produkten är tillverkad av miljövänligt material, som kan återvinnas. Gripsockan skapar ytterst mycket friktion. Rulla upp gripsockan på foten- INTE genom att dra skaftet.

Val av socka

Välj sockan enligt storleken på användarens fot (S, M, L, XL, XXL). Om foten är uppsvullen, det finns suturer eller sår, välj då en storlek större socka. Sockan kan förstöras där det behövs också genom att klippa nätstrukturens hål större; strukturen sprätts inte upp. Hos patienter, som släpar ena foten, kan friktionen som gripsockan erbjuder, försvåra rörelseförmågan. Rekommenderas inte för patienter som drar benen.

Att ta på sig gripsockan

1. Börja med att sätta den rullade sockans spets på tårna och fortsätt att rulla upp den mot helen.
2. Rulla sockdelen upp mot vristen samtidigt som man töjer ut sockan över helen.
3. Jämna ut sockan "masserande" med händerna mot foten, kontrollerande samtidigt att sockan inte spänner vid tårna.

OBS! Undvik nätstrukturens utvidgning vid helen.

Slitsning

4. Om användarens fot är uppsvullen, det finns sår/suturer kan sockan utvidgas genom att slitsa den. Höj nätet och klipp på det stället som skall utvidgas.
5. I duschen lyckas tåtvätten lätt, när man klipper upp ett ca 5 cm hål längs med tårna. Vänd sockans spets ner under tårna och efter tvätten tillbaka på plats.

OBS! Lämna alltid kvar ca 2 cm helt skaft för att få sockan att på foten.

Avlägsning


6. Avlägsna sockorna genom att rulla från skaftet ned mot spetsen. Således är sockorna klara för nästa användning.

Om gripsockor används direkt mot huden under ett dygn (24 timmar), måste sockorna sköljas eller tvättas 40 grader med mild tvättmedel.

Produkten är inte lämplig för utomhusbruk.

Rekommenderas inte för personer med kraftig gummialergi eller direkt på huden som har sår.

Rekommenderas inte för personer som släpar på benen.

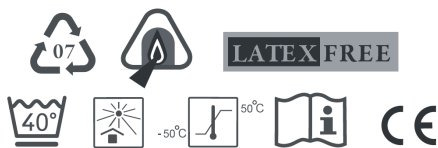

Valmistettu Suomessa
Made in Finland
Tillverkad i Finland



Pitosukan käyttö

Pitosukka on helpokäyttöinen, joustava ja hengittävä. Se ehkäisee liukastumista kuivilla ja kosteilla lattiapinnoilla ja helpottaa asennon vaihtoa vuoteessa. Tuote ei sovellu ulkokäyttöön. Tuote on valmistettu ympäristöystävällisestä energiaksi kierrätettävästä materiaalista. Pitosukka on erittäin kitkainen. Pue pitosukka jalkaan rullaamalla -ei varresta vetäen.

Sukan valinta

Valitse käyttäjän jalan koon mukainen sukka (S, M, L, XL, XXL). Mikäli jalkaterässä on turvotusta, ompeleita tai haavaumia, valitse suurempi sukkakoko. Voit väljentää pitosukkaa leikkaamalla verkkorakenteen aukkoja suuremmaksi; rakenne ei purkaudu. Ei suositella voimakkaasti kumiallergisille henkilöille eikä paljaalle haavaiselle iholle. Ei suositella henkilöille, jotka laahaavat jalkaansa.

Pukeminen

1. Aloita asettamalla rullatun sukan kärki varpaiden kohdalle ja rullaa sukkaa kohti kantapäätä-älä vedä.
2. Rullaa varoen kantapään yli.
3. Tasoita sukan verkkorakenne käsillä "hieroen", varmista ettei sukka kiristä varpaita.

Huom! Vältä verkkorakenteen venymiä kantapäässä sekä tiukkoja kerroksia päkiän ja nilkan kohdalla.

Leikkaaminen

4. Jos käyttäjän jalkaterä on turvoksissa tai siinä on haavaumia/ompeleita, voidaan sukkaa väljentää leikkaamalla. Kohota verkkoa ja leikkaa väljennyskohdasta.
5. Suihkussa varpaiden pesu onnistuu, kun leikkaat n.5cm poikittaisviillon varpaiden yläpuolelta. Käännä sukan pää päkiän alle ja pesun jälkeen takaisin paikoilleen.

Riisuminen

6. Poista sukat rullaamalla varresta kohti kärkeä.

Jos pitosukkaa käytetään paljaissa jaloissa ympäri vuorokauden (24h), ne tulee sen jälkeen huuhdella tai pestä 40 asteessa miedolla pesuaineella.

PITOSUKKA

liukastumisen ehkäisyyn

Instant Grip Sock

IGS-Gripsocka

UDI-DI 643005903GS010WG

Käyttöohjeet Instructions for the use Bruksanvisning

Tarkastettu 28.2.2022

Checked 28.2.2022

Granskad 28.2.2022



Tekniset tiedot / Technical information / Teknisk information

Liukastumista ehkäisevä Pitosukka/Non-slip sock
Instant Grip Sock / Halkfri strumpa Gripsocka

Koko / Size / Storlek: S, M, L, XL, XXL

Materiaali / Material / Material: SEBS
Kierrätys / Recycling / Återvinning: Energiajäte /
Energy waste / Energislöseri

Lääkinnällinen laite / Medical device / Medicinsk
utrustning

Valmistaja / Manufacturer / Tillverkare:

CareCare Oy
FI-MF-000017782
Kirkkokatu1a A6
FI- 80110 Joensuu
www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Myynti / Sales / Försäljning

+358 50 511 2779

Tuotanto / Production / Produktion

+358 50 524 7559

Opastevideot / Instructional videos / Instruktionsfil-
mer: www.carecare.fi/fi/opastevideot

Valmistuspäivä viivakooditarrassa / Manufacturing
date in barcode / Tillverkningsdatum i streckkod

FI UM11688, Pat.Pend FI 20175379



S	36 – 38
M	39 – 41
L	42 – 44
XL	45 – 47
XXL	47 – 50

care
care
www.carecare.fi